

ES-02JH

多功能護理電動床

衛署醫器製壹字第000547、503號



背部上升0~72°



膝部上升0~30°



頭部-膝部聯動功能



床面升降315~630mm



說明：


- 1.床體結構為鋼製粉體塗裝。
- 2.床面骨架為鋼製粉體塗裝，床面板為塑鋼一體成型，表面設置透氣孔；手、腹、膝、腳設有約束帶孔；左右二側設計凸起防止床墊滑動。
- 3.引流袋掛勾設於左右二側臀板下方。
- 4.床頭尾板為塑鋼一體成型，左右設有把手，把手水平面方便拆卸病床，床體四週設有紅色開關固定床頭尾板。
- 5.設頭、膝聯動控制鍵，可同時調整背部及膝部位置，使病患隨時調整最舒適的位置。



扶手式護欄，架設床邊後，可依需求選擇外翻角度，以方便上下床或與床身平行以保護臥床者




可拔插式護欄，依需求與否可隨時裝設於床體側邊或移除

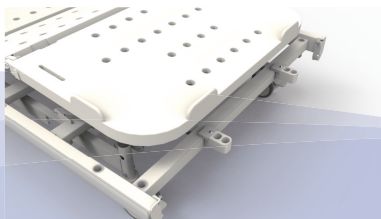

可拔插式護欄收納座，護欄移除後可收納於床尾，不佔據空間



4吋中控煞車系統，使用煞車踏桿可於床尾輕鬆控制整床煞車與否。

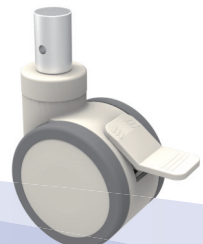

4吋防塵煞車輪

