


ES-12DW

ICU電動加護磅秤床

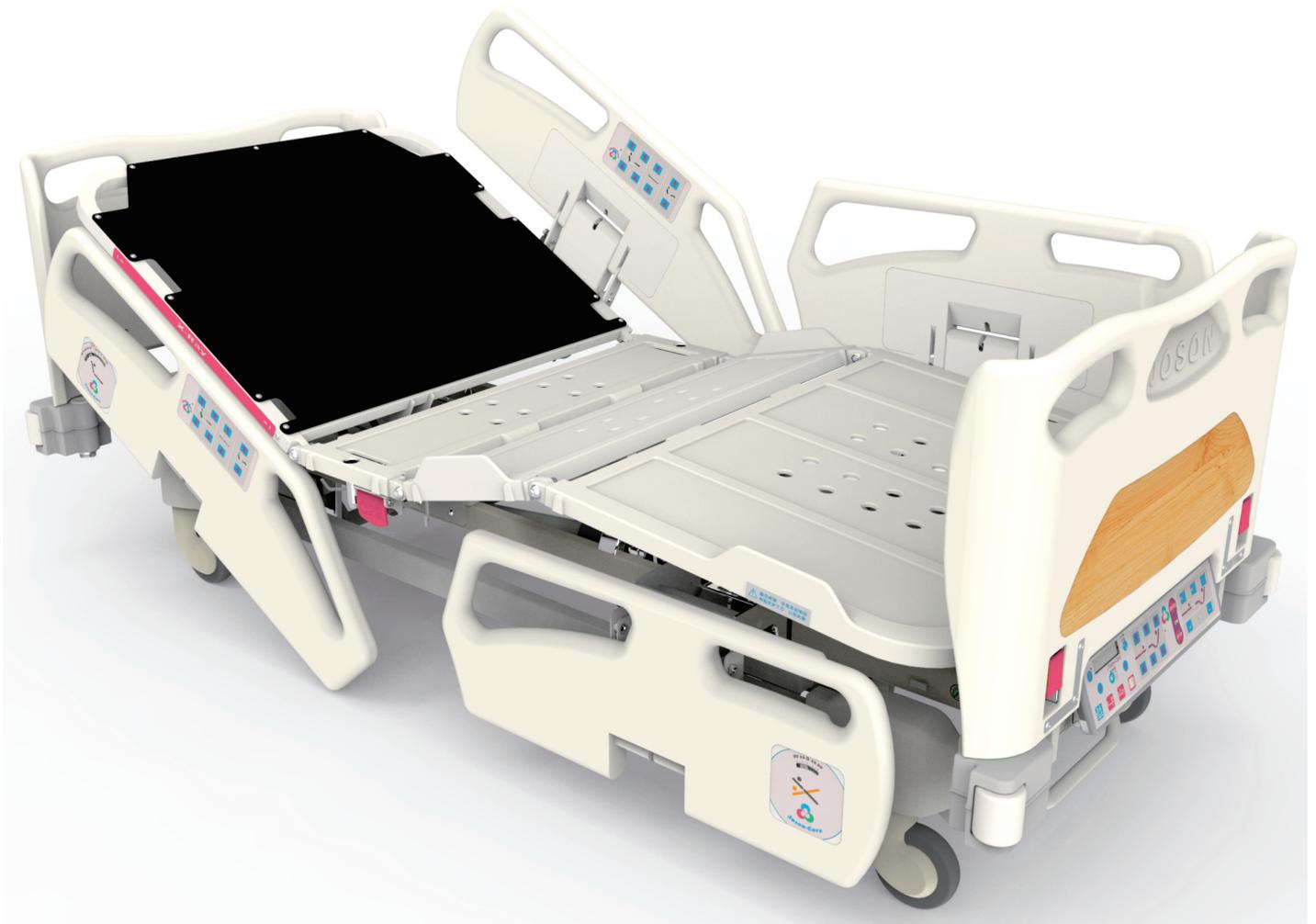

背部X ray透光面板





背部床面使用可透射X光之材質，下方配有X光片固定座



護欄雙面按鍵

內側按鍵由使用者自行調整、外側由醫護人員調整，避免病患及醫護人員交互感染；內、外側均提供背、膝、床面升降、頭膝聯動高度調整。

-  背部上升0~75°
-  膝部上升0~30°
-  頭部-膝部聯動功能
-  床面升降455~755mm
-  床面傾斜0~±12°

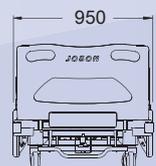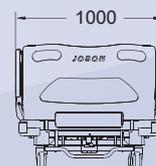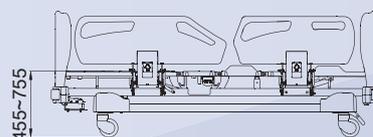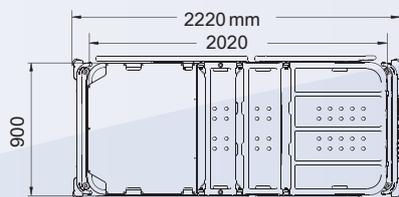

國際醫療安規認證

1. 國際認可醫療電器設備：一般安全性要求IEC/EN 60601-1。
2. 醫療電器設備電磁相容性、干擾的標準 IEC/EN 60601-1-2。
3. 醫療電動病床的特定安全規定IEC/EN 60601-2-52。
4. 衛署醫器製壹 字第000547號。




CPR快速釋放


緊急狀況時，可使背部床面快速度放平，以便進行CPR急救病患。



床體傾斜角度顯示

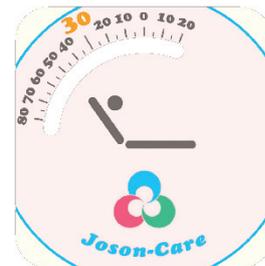


背部傾斜角度顯示

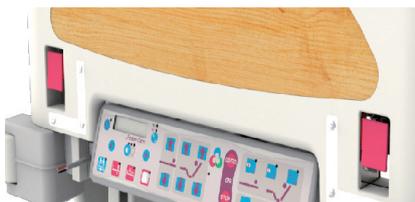

新式床頭尾開關

新式床頭尾固定開關，更為穩固，且操作更為便捷。

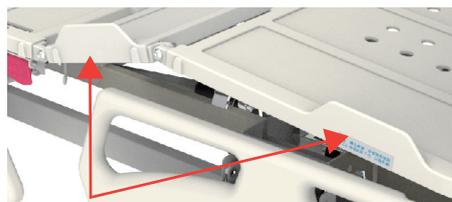

床面四週凸起，可防止床墊滑動




護欄開關&阻尼器

磅秤功能&床尾控制系統

磅秤功能

1. 承重0~250kg
2. 準確度100g
3. 差值功能：體重變化值
4. 鎖住(Hold)功能：可隨時加減衣物，而不影響體重測量
5. 監視功能 ※
6. LED 顯示

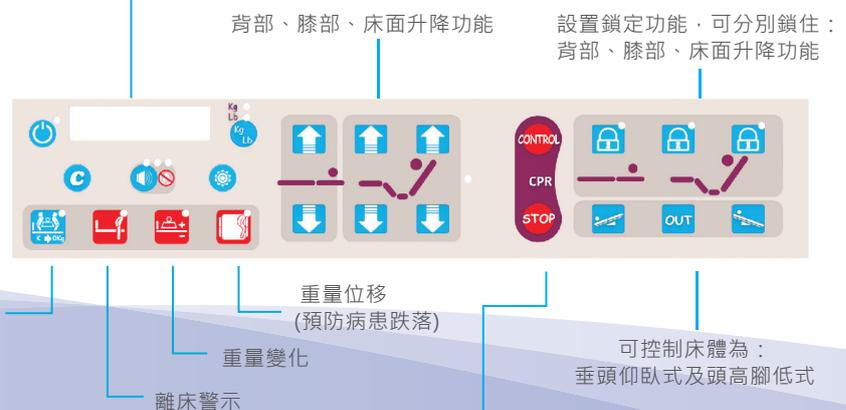

※ 預防病患跌落的警示系統

- 病患離床警報系統安全裝置
- 當病患腳跨出準備離床或身體伸出床外時發出警示

床尾控制面板設有電動控制CPR下降功能按鍵，可啟動三支馬達同步快速下降達到CPR體位