



ES-12HD ES-12DF 尊爵型電動床

衛署醫器製壹字第000547號

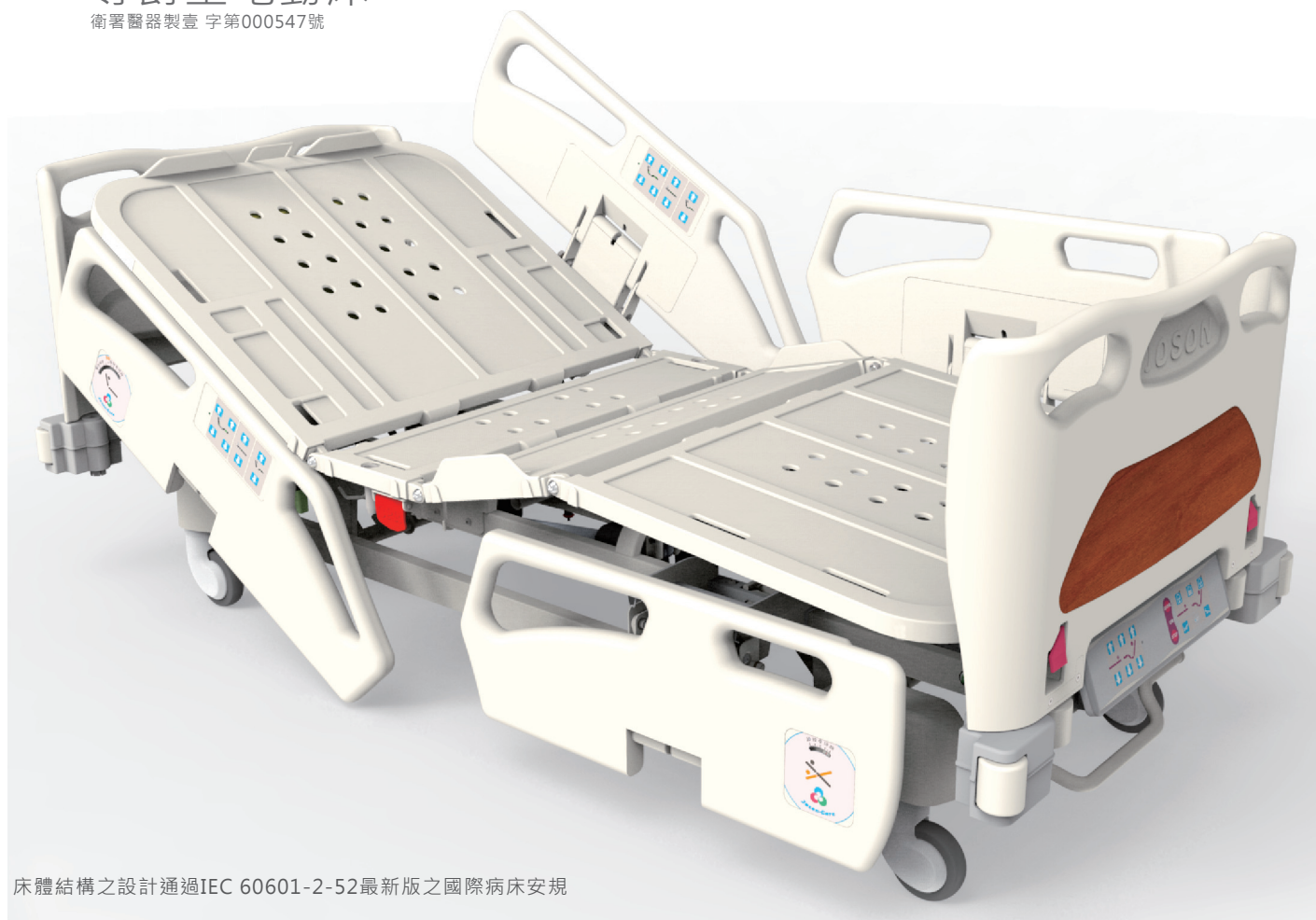


床體結構之設計通過IEC 60601-2-52最新版之國際病床安規

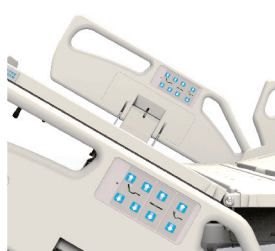


護欄雙面按鍵

內側按鍵由使用者自行調整、
外側由醫護人員調整，避免病
患及醫護人員交互感染；內、
外側均提供背、膝、床面升
降、頭膝聯動高度調整。


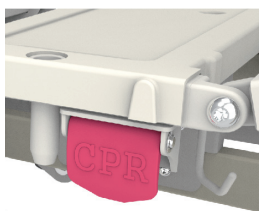


CPR快速釋放




緊急狀況時，可使背部床
面快速度放平，以便進行
CPR急救病患

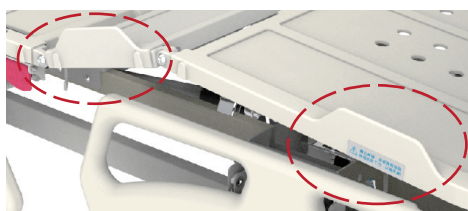


床面四週凸起，可防止床墊 床體/背部傾斜角度顯示

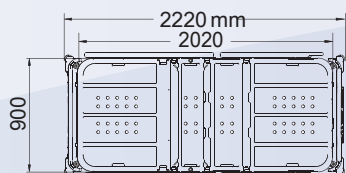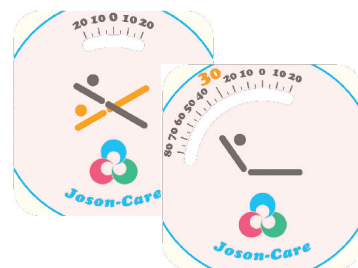


455~755

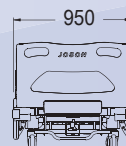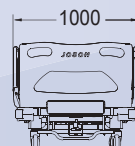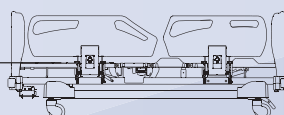


ES-11HD ES-11DF 尊爵型電動床

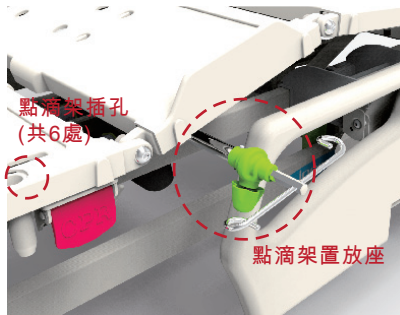

點滴架收納

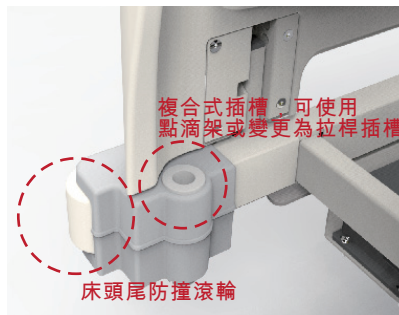

複合式點滴架插槽

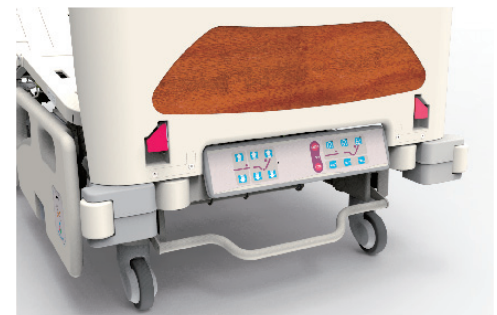


新式床頭尾開關

新式床頭尾固定開關，更為穩固，且操作更為便捷。

電動傾斜床尾控制系統 (HD型系列)

背部、膝部、床面升降功能

背部、膝部、床面鎖定功能

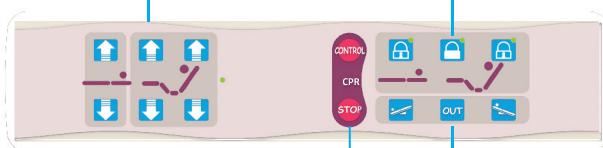


床尾控制面板設有電動控制CPR下降功能按鍵，可啟動三支馬達同步快速下降達到CPR體位

床面電動傾斜功能

半自動傾斜床尾控制系統 (DF型系列)

背部、膝部、床面
鎖定功能

背部、膝部、床面升降功能

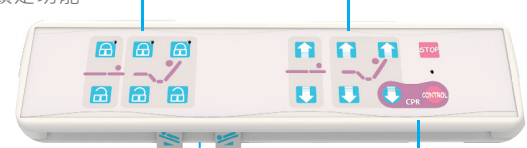

半自動傾斜裝置

床尾控制面板設有電動控制CPR下降功能按鍵，可啟動三支馬達同步快速下降達到CPR體位

特色簡介

1. 床體結構為鋼製粉體塗裝。
2. 床面骨架為鋼製粉體塗裝，床面板為塑鋼一體成型，表面設置透氣孔，床墊擋緣設計；手、腹、膝、腳設有約束帶孔，另外全床共有6處點滴架插座。
3. 引流袋(尿袋)掛勾設於左右二側臀板下方。
4. 床體四角設有防撞滾輪裝置，避免床體移動之碰撞損壞床體。
5. 床頭尾板為塑鋼一體成型，表面平整可供臨時急救板之使用。左右設有把手，把手水平方便拆卸、把手斜面易於施力移動病床，床頭尾版設有紅色固定開關，兼具穩固與易使用功能。
6. 護欄為塑鋼一體成型，直上直下式共4組，放下時縮於床面下方；每組護欄外側設有安全開關；把手之設計不僅符合安全規範、更易於施力移動病床。
7. 附充電電池，以配合臨時停電或移動病床時使用。
8. 可調整床身至座椅的姿勢，以便病患用餐或閱讀。
9. 設頭、膝聯動控制鍵，可同時調整背部及膝部位置，避免病患下滑，使病患隨時調整最舒適的位置。
10. 防水等級IPX4(可選擇IP66等級)。

技術規格

- 床全長，12床型：2220mm
11床型：2120mm
- 床全寬(護欄升起)：1000mm
- 床全寬(護欄放下)：950mm
- 床面長，12床型：2020mm
11床型：1920mm
- 床面寬：900mm
- 床面升降：455~755mm
- 背部床面升降：0°~75°
- 膝部床面升降：0°~30°
- 床面傾斜：0°~±12°

