

ES-96HD

ICU加護型電動床

衛署醫器製壹字第000547號



X ray

背部床面使用可透射X光之材質，下方配有X光片固定座



安全之設計結構

床體結構之設計通過IEC 60601-2-38 最新版之國際病床安規

護欄雙面按鍵

外側提供背部 & 床面高度調整，並附有角度顯示功能。



角度顯示





外側附有角度顯示功能，可隨時監控背部的角度

護欄內側按鍵由使用者自行調整、外側由醫護人員調整，避免病患及醫護人員交互感染；內側提供背、膝、床面升降、頭膝聯動高度調整



CPR快速釋放

緊急狀況時，可使背部床面在2~3秒內快速度放平，以便進行CPR急救病患

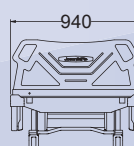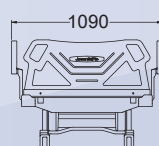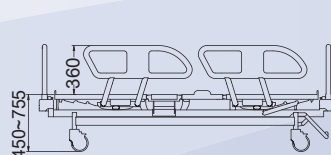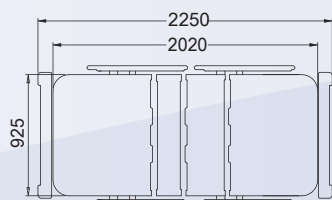


ES-96HD



-  背部上升0 ~ 85°
-  膝部上升0 ~ 32°
-  頭部-膝部聯動功能
-  床面升降450 ~ 755mm
-  床面傾斜0 ~ ±12°

1. 床體結構為鋼製粉體塗裝。
2. 床面骨架為鋼製粉體塗裝，床面板為塑鋼一體成型，表面設置透氣孔；手、腹、膝、腳設有約束帶孔；頭腳&左右二側共凸起六處，可防止床墊滑動。
3. 引流袋(尿袋)掛勾設於左右二側臀板下方。
4. 床體四角設有防撞裝置，避免床體移動之碰撞損壞床體。
5. 床頭尾板為塑鋼一體成型，表面平整可供臨時急救板之使用。左右設有把手，把手水平面方便拆卸、把手斜面易於施力移動病床，床體四周設有紅色開關固定床頭尾板。
6. 護欄為塑鋼一體成型，直上直下式共4組，放下時縮於床面下方；每組護欄外側設有安全開關；把手之設計不僅符合安全規範、更易於施力移動病床。
7. 附充電電池，以配合臨時停電或移動病床時使用。
8. 可調整床身至座椅的位置，以便病患用餐或閱讀。
9. 設頭、膝聯動控制鍵，可同時調整背部及膝部位置，避免病患下滑，使病患隨時調整最舒適的位置。
10. 防水等級IPX4(可選擇IP66等級)

點滴架插座
(共6處)

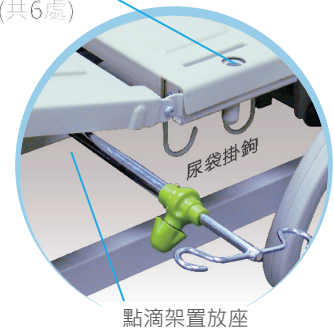


床尾護士控制器



床尾控制面板設有電動控制CPR下降功能按鍵，可啟動三支馬達同步快速下降達到CPR體位

可控制床體為：
垂頭仰臥式及頭高腳低式

設置鎖定功能，可分別鎖住：
背部、膝部、床面升降功能

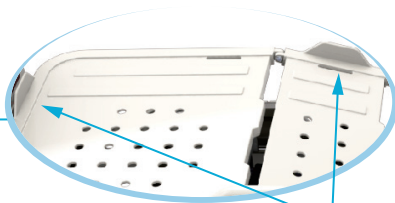

床面四週凸起，
可防止床墊滑動

新型第M407062號專利
新型第M407047號專利
新型第M342806號專利