

JE-200 / JE-200(S)

急診油壓推床

衛署醫器製壹字第000502號

-  背部上升0~90°
-  膝部上升0~30°
-  床面升降580~930mm
-  床面傾斜±18°



標準配備


- 二節式點滴架二組
- 全覆式4欄一組
- 3"泡棉墊

材質：

1. 床體鋼製粉體塗裝。
2. 床面板ABS板 + 電木板，上半身可透視X光。
3. 床體四角塑鋼整體成型防撞裝置。
4. 底盤蓋ABS材質一體成型，附 500L氧氣瓶槽及置物槽。



說明

1. 床面升降範圍：350mm。
2. 背部 0°~90° 無段式，雙液壓調整。
3. 腳部上升 0°~30°，隱藏式伸縮搖桿控制。
4. 床面傾斜功能 ± 18°。
5. 四輪同步煞車系統含直行煞車功能，床頭尾均設有踏板。
6. 雙側操控上下及俯仰位變化立油壓系統。
7. 床頭附推送把手可折合收藏。
8. 床頭尾端各一組折合式點滴架。

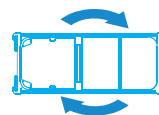

第五輪轉向系統 (JE-200)

1. 更輕鬆省力的推送油壓推床。
2. 方便迴轉、轉彎，減少迴轉半徑。

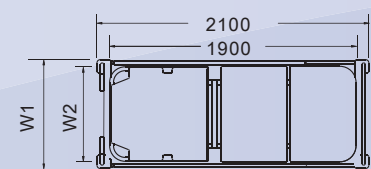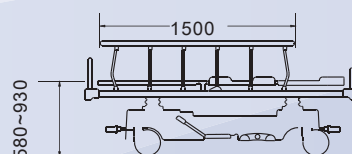

JE-200 W1:840 W2:740
JE-200(S) W1:790 W2:690